


Digoxigenin NHS Ester 说明书

1. 一般性质

产品名称:	Digoxigenin NHS Ester (中文: Digoxigenin 琥珀酰亚胺酯)
CAS 号:	129273-26-3
产品货号:	OLE-0101-5MG
外观性状:	固体
分子式:	C ₃₅ H ₅₀ N ₂ O ₁₀
分子量:	658.78
净分子量(F.W.)	N/A
结构式:	

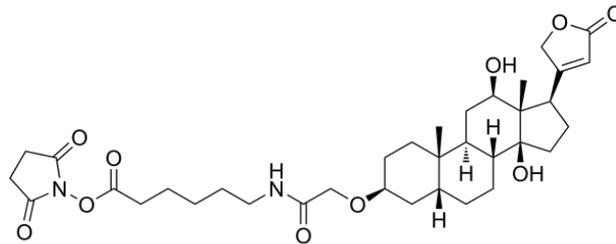

光谱:	λ max: 485 ± 3nm
溶解性:	几乎不溶于水
质控项目:	如, HPLC (≥90%)

2. 产品描述

Digoxigenin NHS ester 是一种活化酯, 在温和条件下很容易与氨基(NH₂)发生反应, 将 digoxigenin (HY-B1025) 部分连接到蛋白质或氨基酸上。Digoxigenin NHS ester 可用于标记蛋白质和寡核苷酸。

3. 产品用法

适用于蛋白质和寡核苷酸标记。

4. 储存条件

-20℃ 储存。